

Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

PROCEDENCIA WEB



CALDERÓN
CENTRO DIAGNÓSTICO
www.laboratoriocalderon.com

Estudio fecal molecular



Material Suministrado

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud identificado numéricamente
- 1 troquel de etiquetas numeradas
- 1 Hisopo con medio de transporte
- 1 frasco estéril
- 1 Caja de envío
- 1 bolsa para documentos
- 1 bolsa nevera
- 1 paquete refrigerante


Condiciones generales

- Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico en el momento de la toma de muestras.
- Una vez obtenida la muestra, conservarla en el refrigerador hasta el momento del envío.
- Realizar el envío el mismo día de la toma de muestras
- Obtener y enviar la muestra de lunes a jueves, teniendo en cuenta que no sea víspera de festivo. Tenga en cuenta que son fiestas locales en Castellón: 29 de Junio y el 9 de octubre.


Instrucciones

1. Cuando reciba el kit, introduzca el paquete refrigerante en el congelador.
2. Cumplimente el volante de solicitud e introdúzcalo en la bolsa para documentos.
3. Identifique el frasco estéril y el tubo de tapón negro con las etiquetas que llevan el mismo número que el volante de solicitud.
4. Obtenga una muestra de heces e introduzca un volumen equivalente a una nuez en el frasco estéril.
5. Introducir el hisopo **verticalmente** en diferentes puntos de la muestra de heces contenida en el frasco de forma que quede impregnado y después introduzca el hisopo en el tubo de medio de transporte con tapón negro. Si las heces son duras, puede facilitar el proceso si introduce previamente el hisopo en el líquido que contiene el tubo con tapón negro. **Es importante que solo se obtenga la cantidad justa de muestra para que el hisopo quede impregnado, cualquier exceso de muestra debe ser eliminado antes de introducirlo definitivamente en el tubo con tapón negro.**

Como realizar la toma:

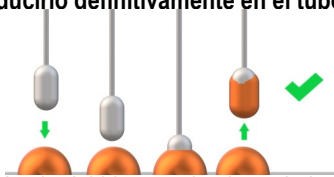

Como NO realizar la toma:

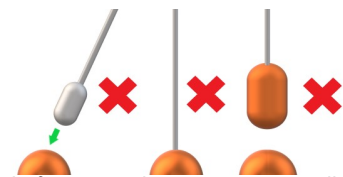

6. Rompa la parte superior del palo del hisopo a la altura de la muesca destinada a tal efecto, de forma que la parte correspondiente a la muestra quede introducida dentro del medio líquido de transporte y se permita el cierre del tubo.
7. Cierre el tubo con el tapón negro y cierre el frasco con la muestra de heces.
8. Introduzca el frasco, el tubo y el paquete refrigerante previamente congelado en la bolsa nevera, y ésta en el refrigerador.
9. Introduzca la bolsa con los documentos y la bolsa nevera con las muestras en la caja de transporte.
10. Llamar al mensajero de la compañía Nacex (Tfno. 900 100 000).
11. Conservar refrigerado hasta el momento del envío.
12. Realizar el envío al abonado nº 1201/75 o a la siguiente dirección:

Centro Diagnóstico Calderón. C/Colón nº 37. 12001 Castellón.

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.