

KIT ESTUDIO FECAL MOLECULAR

TOMA DE MUESTRAS



Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de heces para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar de manera cualitativa mediante PCR a tiempo real la presencia de parásitos.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Hisopo con medio de transporte Cary Blair
- 1 Frasco estéril suministrado fuera del kit
- 1 Caja de envío
- 1 Bolsa para documentos
- 1 Bolsa nevera
- 1 Paquete refrigerante

CONDICIONES PREVIAS:


- Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico en el momento de la toma de muestras.
- Una vez obtenida la muestra, conservarla en el refrigerador hasta el momento del envío.
- Realizar el envío el mismo día de la toma de muestra

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

1. Cuando reciba el kit, introduzca el paquete refrigerante en el congelador durante al menos 8 horas.
2. Obtenga una muestra de heces e introduzca un volumen equivalente a una nuez en el frasco estéril.
3. Introducir el hisopo verticalmente en diferentes puntos de la muestra de heces contenida en el frasco de forma que quede impregnado y después introduzca el hisopo en el tubo de medio de transporte con tapón verde. Si las heces son duras, puede facilitar el proceso si introduce previamente el hisopo en el líquido que contiene el tubo con tapón verde.

Como realizar la toma:

4. Rompa la parte superior del palo del hisopo a la altura de la muesca destinada a tal efecto, de forma que la parte correspondiente a la muestra quede introducida dentro del medio líquido de transporte y se permita el cierre del tubo.

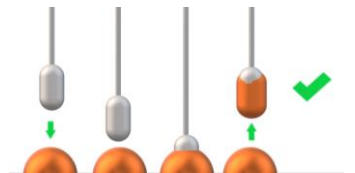

5. Cierre el tubo con el tapón verde y cierre el frasco con la muestra de heces.
6. Introduzca el frasco, el tubo y el paquete refrigerante previamente congelado en la bolsa nevera, y ésta en el refrigerador.
7. Introduzca la bolsa con los documentos y la bolsa nevera con las muestras en la caja de transporte.
8. Conservar refrigerado hasta el momento del envío.

GESTIÓN DEL ENVÍO

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderon.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

PRECAUCIONES: este kit no debe utilizarse para otro fin que no sea su uso previsto.

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

Versión 1
24/01/2024



UDI Número de identificación único

LOT Número de lote de fabricación



NON STERILE No estéril



Fecha de fabricació

Referir al manual de instrucciones

IVD Diagnóstico in vitro

Precauciones

CE Marca CE

Fabricante

Fecha de caducidad

No usar si el empaquetado está dañado

AYALA SAMPLE KITS, S.L.
B-44749877
Paseo de la Universidad 48
12006, Castellón de la plana. Spain.
info.ayalasamplekits@gmail.com